



SUBLiM'iNTELLiGENT MASSAGER

Appareil de massage rechargeable à vibrations



Une toute nouvelle manière de penser le bien-être

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Dimensions :	267 x 85 x 59 mm
Poids net :	320 g
Alimentation et fréquence :	100-240 V/50-120 Hz
Puissance de sortie :	5.0 V – 1.5 A
Tension nominale :	3.7 V
Puissance nominale :	2.5 W
Alimentation :	1 pile lithium ion haute capacité rechargeable
Temps de charge/Autonomie :	4-5h/Jusqu'à 7 jours en utilisation quotidienne
Type de massage :	Vibrations, 5 modes, intensité variable
Zones de massage :	Tout le corps : Nuque, Dos, Bras, Jambes, Taille, Pieds ...
Particularités :	Fonction mémoire (bouton jaune) 100% waterproof (20 min en immersion) Manche anti-dérapant Portable, utilisation sans fil longue durée Rechargeable Contrôle intelligent de la puissance Fonction verrouillage transport
Très silencieux :	max 58 dB
Arrêt automatique :	Après 15 minutes

DESCRIPTION ET COMPOSITION DE L'APPAREIL

Le coffret inclut :

- 1 appareil SUBLiM'INTELLiGENT MASSAGER
- 1 câble USB
- 1 pochette de rangement
- 1 mode d'emploi

UTILISATION

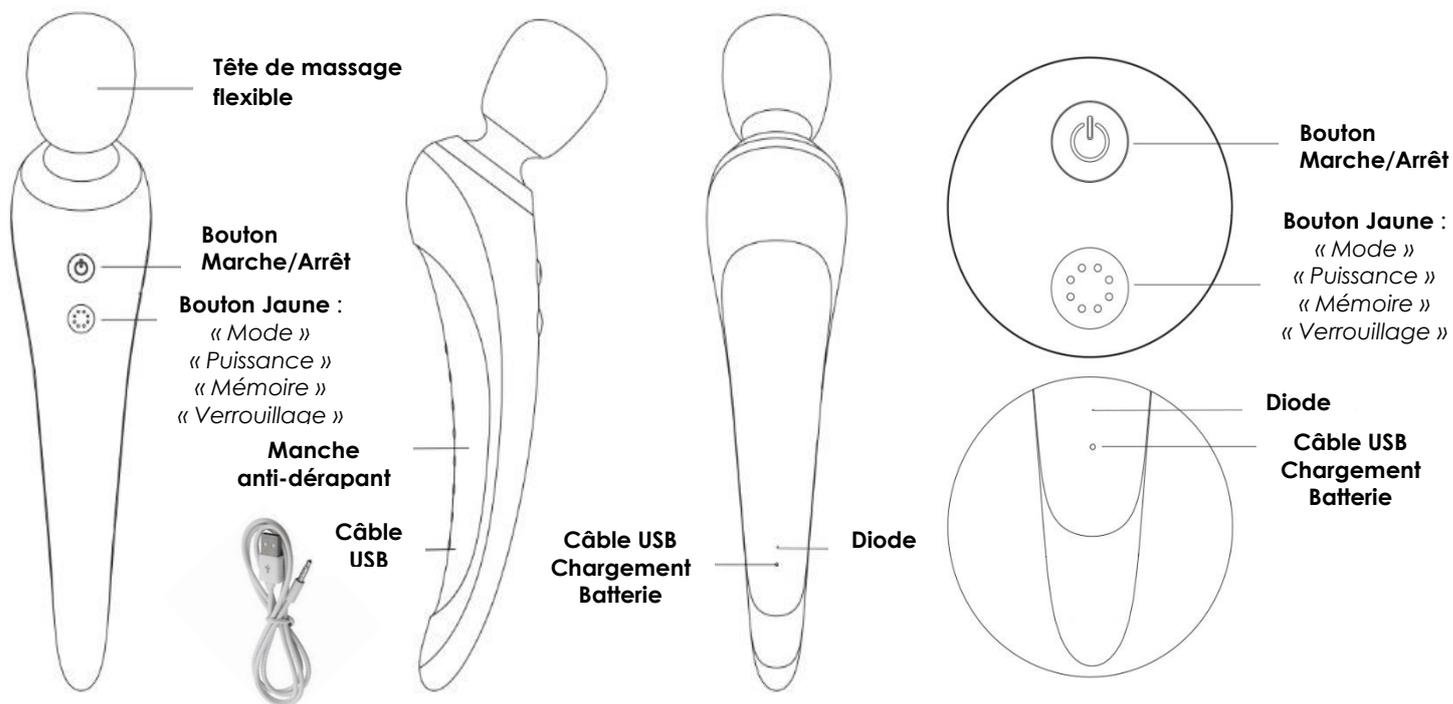

Charge de la batterie

L'appareil se recharge avec un adaptateur prise USB fourni.

Lors de la première utilisation, chargez intégralement la batterie.

Insérez l'embout du câble dans la connectique de chargement de la batterie situé au dos de l'appareil. Branchez l'embout USB fourni sur un ordinateur ou sur un adaptateur USB/secteur adapté aux caractéristiques de l'appareil (non fourni).

La diode d'allume et le chargement de la batterie commence.

La charge est complète lorsque la diode s'éteint.

Fonction Verrouillage transport

Cet appareil a été conçu avec une fonction de sécurité, qui permet de verrouiller tous les boutons pendant un transport (plus de problème de mise en marche intempestive). Lorsque le Verrouillage est activé, plus aucun fonctionnement n'est possible.

Pour activer la fonction Verrouillage de l'appareil, appuyez en même temps sur les boutons Mise en marche/arrêt et sur le bouton jaune pendant environ 3 à 5 secondes. Le verrouillage est possible lorsque l'appareil est allumé ou éteint. L'appareil émet 2 vibrations pour confirmer le verrouillage.

Pour déverrouiller l'appareil, effectuez de nouveau cette opération. L'appareil émet une vibration pour confirmer la désactivation de la fonction verrouillage.

Bouton Marche/Arrêt


Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt. La diode située au dos de l'appareil s'allume. Le premier massage, à faible intensité, commence.

Pour éteindre l'appareil, appuyez de nouveau sur le bouton Marche/Arrêt. La diode au dos de l'appareil s'éteint. L'appareil enregistre automatiquement le dernier mode de massage utilisé. Lors de la prochaine utilisation, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt puis sur le bouton jaune. L'appareil démarrera automatiquement sur le dernier mode utilisé.

Bouton Jaune Modes/Mémoire/Intensité/Verrouillage

Cet appareil propose 5 modes de massage à intensité variable. Lorsque l'appareil est en fonctionnement, appuyez sur le bouton jaune pour passer d'un mode de massage à l'autre. La diode au dos de l'appareil clignote alors 3 fois.

Pour changer l'intensité, appuyez longuement sur le bouton jaune. Plus vous appuyez longtemps sur le bouton jaune, plus la vitesse du massage augmente. Relâchez le bouton jaune dès que la vitesse souhaitée est obtenue. Choisir une intensité faible pour les zones sensibles (nuque, épaules, genoux ... et une intensité forte pour les cuisses, les bras, les fesses ...).

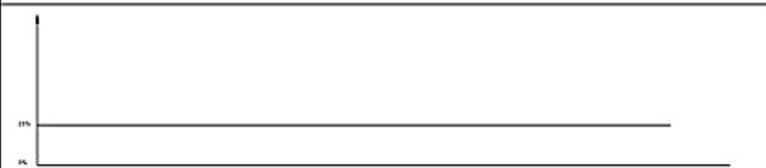Modes	Schémas des intensités et des vitesses
Mode 1	
Mode 2	
Mode 3	
Mode 4	
Mode 5	

NETTOYAGE ET RANGEMENT

Nettoyage

- Cet appareil est waterproof. Vous pouvez le nettoyer en utilisant un peu de savon liquide et en le rinçant sous le robinet.
- Séchez bien l'appareil à l'aide d'un chiffon doux.
- N'utilisez aucun détergent ou aucun produit abrasif.

Rangement

1. Rangez l'appareil dans sa boîte et placez-la dans un endroit sec et tempéré.
2. Tenez l'appareil à l'écart d'une trop forte température, ou des rayons du soleil.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

1. N'utilisez l'appareil que pour les fonctions indiquées dans ce manuel.
2. N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est en charge.
3. Dès que la diode indique que l'appareil est chargé, débranchez l'appareil. Ne pas surcharger la batterie.
4. Tenez l'appareil à l'écart de tout appareil chauffant (télé, four ...).
5. Si vous constatez un dysfonctionnement, cessez l'utilisation de l'appareil et retournez-le pour SAV.
6. L'utilisation sur des enfants ou sur une personne mentalement déficiente doit être supervisée par un adulte.
7. Ne pas utiliser sur une peau irritée ou infectée.
8. Ne pas utiliser trop longtemps sur la même zone du corps.
9. Ne pas utiliser l'appareil en conduisant ou pendant toute autre activité sur des machines.
10. Cet appareil n'est pas un dispositif médical. Son utilisation doit être restreinte au bien-être.
11. Avant toute utilisation, demandez l'avis de votre médecin traitant si :
 - Vous êtes enceinte ou moins de 4 mois après un accouchement
 - Vous êtes porteur d'un pacemaker ou de tout autre implant électronique
 - Vous avez des problèmes de circulation sanguine ou souffrez de thrombose
 - Vous souffrez d'ostéoporose

NOTE : L'appareil s'éteint automatiquement après 15 minutes. Veuillez attendre 30 minutes avant d'utiliser de nouveau l'appareil. Une trop longue utilisation peut surchauffer l'appareil et diminuer son bon fonctionnement et sa durée de vie. L'appareil doit rester froid.

DYSFONCTIONNEMENT

Panne	Solution
L'appareil ne s'allume pas.	La batterie est faible. Rechargez complètement l'appareil avant de le réutiliser. La fonction Verrouillage Transport est activée. Désactivez-la selon les instructions mentionnées dans ce manuel.
L'appareil s'est arrêté pendant la séance de massage.	La batterie est faible. Rechargez complètement l'appareil avant de le réutiliser. L'appareil s'éteint automatiquement après 15 minutes. Veuillez attendre 30 minutes avant d'utiliser de nouveau l'appareil.
L'appareil émet du bruit pendant la séance de massage.	Cet appareil a un moteur très silencieux, mais le léger bruit du moteur est normal. Retournez l'appareil pour SAV si le bruit devient anormal.

Ne tentez jamais d'ouvrir ou de réparer l'appareil par vous-même.

GARANTIE ET CONDITIONS

1. Mondial Innovation garantit l'absence de défaut et le caractère complet de l'appareil.
2. Les réparations doivent être exclusivement effectuées par notre propre Service Après-Vente.
3. La durée de la période de notre garantie pièces et main d'œuvre est de 2 ans après la date de votre achat, sous réserve des problèmes évoqués dans notre mode d'emploi.
4. Les réclamations ou les plaintes concernant notre produit doivent être adressées directement à nos Services. Nos Services, en relation avec le Vendeur, sont compétents pour déterminer la Cause et la Nature de la panne signalée. L'appareil sera remplacé uniquement s'il ne peut être réparé.
5. Le propriétaire de l'appareil devra faire parvenir celui-ci à l'adresse indiquée ci-après
DELATEX
ZAC DU PLATEAU, 17, RUE DES MARRONNIERS, 94240 – L'HAY LES ROSES
5. Le temps nécessaire pour effectuer la réparation dépend de l'importance de la réparation en cause.
6. La responsabilité de Mondial Innovation pour un appareil sous garantie est limitée au prix facturé à notre client.

La garantie ne peut être appliquée dans les cas suivants :

- Le certificat de garantie a été incorrectement rempli ou falsifié
- L'appareil a été ouvert par l'acheteur ou un service non autorisé
- Les défauts observés proviennent d'une mauvaise utilisation, du non-respect du mode d'emploi
- La pénétration, à l'intérieur de l'appareil, de corps étrangers solides ou liquides

- Les signes de chute de l'appareil : brisure, craquements ou les signes de problèmes de transport effectués par l'acheteur
- Les défauts dus à des causes externes telles que : désastres naturels, incendie

Conditions de Retour

Le Produit doit être retourné accompagné du Certificat de Garantie correctement rempli et de la facture d'achat.

Merci de nous contacter par téléphone ou par E-mail avant de retourner votre appareil et de nous décrire le ou les problèmes rencontrés lors de l'utilisation à.

MONDIAL INNOVATION – DELATEX
 Tel : 01.46.77.05.20 / Fax : 01.46. 78.18.42
 E-mail : delatex@wanadoo.fr

Elimination

Lors de l'élimination des matériaux, respectez les prescriptions locales. Pour éliminer l'appareil, conformez-vous à la directive sur les appareils électriques et électroniques 2002/96/CE – DEEE (Déchets des Equipements Electriques et Electroniques). Pour toute question, adressez-vous aux collectivités locales responsables de l'élimination de ces déchets.



Volet à conserver par l'acheteur	Volet à retourner
MONDIAL INNOVATION DELATEX 29, rue des Favorites 75015 Paris Tel : 01.45.31.03.84 Fax : 01.45.31.19.34 Bon de garantie 2 ans Pièce et main d'œuvre SUBLIM' INTELLIGENT MASSAGER Date d'achat : Cachet commercial ou adresse du revendeur:	Bon de garantie Volet à retourner dans les 15 jours pour la validation de la garantie à : MONDIAL INNOVATION DELATEX 29, rue des Favorites 75015 Paris Votre appareil est garanti 2 ans SUBLIM' INTELLIGENT MASSAGER Nom: Prénom: Adresse: Code postal: Ville: E-mail :@..... Date d'achat : Cachet commercial ou adresse du revendeur: