

MANUEL

CYBERLINE BEAUTY EMS MASSAGER 4 IN 1

ELECTROSTIMULATION et ENDOMASSAGE

CORPS & VISAGE



LE PARTENAIRE INCONTOURNABLE DE VOTRE BEAUTE

Petit, léger, facile à manipuler, mais avec la puissance d'un appareil professionnel

TESTS EFFECTUES par 6 THERAPEUTES sur 25 femmes, sur une durée de 60 jours :

Nette amélioration, voire effacement de la peau d'orange

Efficacité prouvée sur l'amélioration de la mobilité du plan cutané

Efficacité prouvée sur l'amélioration de la consistance de la cellulite

Diminution de la douleur de la cellulite à la palpation

Prévient les relâchements musculaires et cutanés

Elimine la fatigue musculaire

Aide à améliorer la circulation sanguine

Peau plus lumineuse, plus souple, plus élastique

La cellulite donne à la peau une apparence bosselée et souvent disgracieuse. Presque toutes les femmes sont concernées.

Cet effet capitonné (peau d'orange) est causé par la répartition des cellules graisseuses sous la peau. La cellulite n'est pas une maladie et on peut en avoir même sans être en surpoids.

Il existe différents types de cellulite :

- **La cellulite adipeuse :**

Les cellules adipeuses sont organisées en grappes. En consommant des graisses en excès, les adipocytes grossissent, formant alors des petites bosses (peau d'orange).

Elle est le plus souvent localisée sur le ventre, les hanches, les poignées d'amour, les fesses, la culotte de cheval.

Cette cellulite est en général molle et parfois douloureuse au toucher.

- **La cellulite aqueuse :**

Les cellules de la peau stockent non pas des graisses, mais de l'eau. Cette cellulite le plus souvent localisée sur les chevilles, les mollets, les cuisses et les bras.

Elle est souvent liée à des problèmes de circulation veineuse et lymphatique.

C'est une cellulite non douloureuse, mais aux sensations désagréables (jambes lourdes, pieds gonflés ...).

- **La cellulite fibreuse :**

Les fibres de collagènes peuvent devenir rigides et empêcher la répartition des cellules graisseuses.


Elle est le plus souvent localisée sur les cuisses et les genoux.

C'est une cellulite dure et douloureuse au toucher.


Il est déconseillé d'utiliser cet appareil en cas de problèmes veineux et lymphatiques. En cas de doute, consultez votre médecin.

DESCRIPTION

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

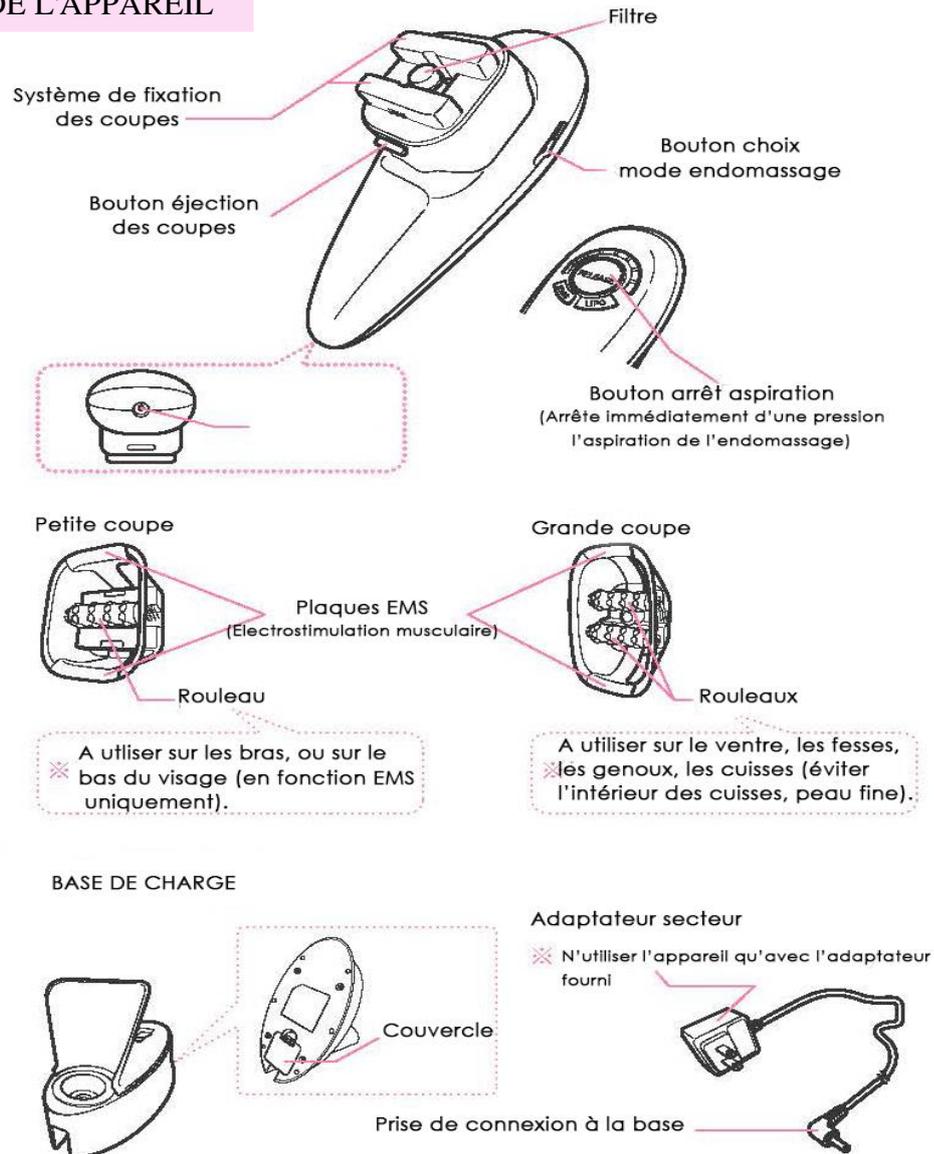

FONCTIONS DES BOUTONS

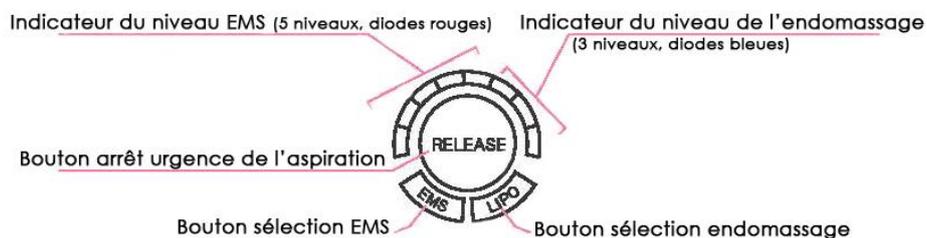

UTILISATION DES BOUTONS

EMS : Electro Stimulation Musculaire, CORPS ou VISAGE (en coup flash uniquement)

LIPO : **Endomassage CORPS uniquement, 2 modes d'aspiration**

- Mode 1: aspiration et repos, aspiration intermittente (aspiration douce, à utiliser pour les premières séances).
- Mode 2: aspiration continue (aspiration plus forte).

EMS (Basses fréquences 05/10/20 ou 100 Hz): Pour mettre en marche la fonction électrostimulation, appuyez sur le bouton EMS pendant 3 secondes. Une première diode rouge s'allume. Lors de la mise en marche, le niveau EMS est

automatiquement réglé sur 1. À chaque pression courte supplémentaire sur le bouton EMS, la puissance de la stimulation augmente d'une intensité.

Lors des premières séances, commencez par le niveau 1, le temps de vous habituer à la stimulation.

Cycle des niveaux: Niveau 1, Niveau 2, Niveau 3, Niveau 4, Niveau 5, EMS OFF.

LIPO (De 28 à 40 Kpa): Pour mettre en marche la fonction endomassage, appuyez sur le bouton LIPO pendant 3 secondes. Une première diode bleue s'allume. Lors de la mise en marche, le niveau LIPO est automatiquement réglé sur 1. A chaque pression courte supplémentaire sur le bouton LIPO, la puissance de l'endomassage augmente d'un niveau.

Lors des premières séances, commencez par le niveau 1, le temps de vous habituer à l'aspiration.

Cycle des niveaux: Niveau 1, Niveau 2, Niveau 3, LIPO OFF.

NOTE : La fonction LIPO ne convient pas au traitement du VISAGE. Sur le reste du corps, il est possible d'utiliser les 2 modes EMS et LIPO ensemble.

La fonction EMS ne fonctionne que si les plaques électrodes sont humidifiées avec une huile, un sérum ou du gel conducteur (non fournis)

Au bout de 10 minutes d'utilisation, soit le temps d'une séance sur une même zone, l'appareil s'éteint automatiquement.

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

Avant la première utilisation, ou après une longue période sans utilisation, veillez à bien intégralement charger l'unité principale.

TEMPS DE CHARGE ET DURÉE D'UTILISATION

Temps de charge : entre 2 et 3h. La durée d'utilisation après charge varie selon l'utilisation (modes utilisés, puissance...).


CHARGE SUR LA BASE

1. Connectez la fiche du câble de l'adaptateur secteur à la base.
2. Branchez le bloc secteur à une prise.
3. Positionnez l'unité principale sur sa base en veillant bien à ce que le port de charge de l'unité principale soit bien inséré sur la base.
4. Les diodes sur l'unité principale clignotent durant toute la période de charge et s'éteignent une fois que l'appareil est totalement chargé.

Si les diodes ne clignotent pas, l'unité principale est mal positionnée sur sa base. Remplacez-la correctement.

La durée de charge peut légèrement varier selon différents paramètres.

5. A la fin de la charge, débranchez le bloc secteur.

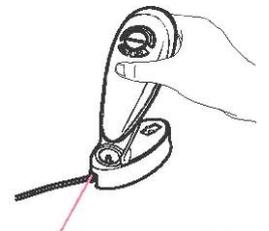

Connexion de l'adaptateur à la base

CHARGE SANS LA BASE

Il est possible de charger l'unité principale sans sa base.

En voyage, il est pratique de ne pas emporter la base de charge et de recharger l'appareil en connexion directe avec le câble du bloc secteur.

1. Soulevez le couvercle de la base, et repoussez la connexion.
2. Reliez la connexion du bloc secteur directement sur le port de charge de l'unité principale, à l'extrémité inférieure de l'appareil.
3. Branchez le bloc secteur sur une prise.
4. Les diodes sur l'unité principale clignotent durant toute la période de charge et s'éteignent une fois que l'appareil est totalement chargé.
5. A la fin de la charge, débranchez le bloc secteur et déconnectez le câble de l'appareil.

Attention: N'utilisez que le bloc secteur fourni avec l'appareil.



INSTALLATION DES COUPES D'ENDOMASSAGE


COMMENT INSTALLER UNE COUPE ?

1. Choisissez la coupe adaptée à la partie du corps à traiter.
2. Positionnez fermement la coupe sur le système de fixation de l'unité principale.
3. Vérifiez que la coupe est bien fixée, afin d'éviter toute chute de la coupe ou toute fuite d'air entre la coupe et l'appareil.



COMMENT ÔTER UNE COUPE ?

Tout en appuyant sur le bouton d'éjection des coupes, tirez sur la coupe.

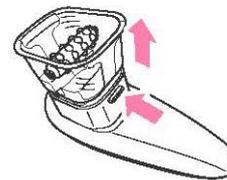

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Si vous avez des muscles très lâches, ou une peau très fragile, il est recommandé de porter un collant fin, d'appliquer de l'huile végétale neutre ou de l'huile sèche Caprylis. Bien tirer la peau au passage de l'appareil.
- Veillez à bien respecter les précautions d'usage ci-dessous.
- Une séance ne doit pas dépasser 10 minutes sur une même zone (extérieur des cuisses, ventre ...).
- Pendant une séance, déplacez doucement l'appareil, sans forcer.
- N'effectuez pas une pression trop forte sur la peau.
- Appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence de l'aspiration (RELEASE) si l'aspiration devient trop forte et désagréable.
- Lors des premières utilisations, il est conseillé de choisir le niveau 1 EMS (électrostimulation) ou/et LIPO (endomassage).
- Si la coupe n'aspire pas beaucoup, elle est certainement mal installée et de l'air fuit entre la coupe et l'appareil.
- Pour les peaux fragiles, il est recommandé de porter un collant fin, d'appliquer une huile de massage végétale neutre ou de l'huile sèche Caprylis pour mieux faire glisser la coupe.
- Après utilisation (surtout lors des premières séances), la peau peut légèrement rougir. Cela disparaît en 24h.




CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser l'appareil dans les cas suivants :

- Si vous êtes mineur
- Si vous êtes porteur d'un stimulateur cardiaque ou si vous souffrez de problème cardiaque ou cardiovasculaire.
- Si vous êtes atteint de cancer ou d'épilepsie.
- Si vous êtes enceinte
- Si vous souffrez de phlébites, de varices, de thrombophlébites
- Si vous souffrez d'insuffisance veineuse ou lymphatique
- Si vous prenez un traitement anticoagulant
- Présence de maladies graves sans avis médical
- Si vous avez une hernie inguinale ou abdominale
- En cas de troubles artériels importants
- En cas de maladie chronique du foie et des reins
- En cas de maladies de la peau de tous types
- Sur des plaies ou cicatrices d'opération récente
- Ne pas placer les électrodes sur les carotides, sur les sinus, sur le front, sur le cou ou la tête
- Ne pas placer les électrodes sur ou près du cœur
- Ne pas placer les électrodes sur les parties génitales, sur une plaie ouverte ou une zone infectée ou en état inflammatoire.

UTILISATION LIPO

1. Sélectionnez la coupe appropriée à votre séance, puis fixez-la correctement.
2. Pour mettre en marche l'appareil, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton LIPO. Une diode bleue (LIPO) s'allume.
3. Appuyez sur le bouton LIPO (endomassage) pour sélectionner l'intensité.
4. Lors des premières séances, il est conseillé de choisir l'intensité 1.
5. Sélectionnez le mode :
 - MODE 1 : Aspiration intermittente (ce mode est recommandé pour les premières utilisations).
 - MODE 2 : Aspiration continue.

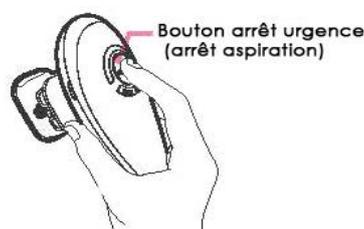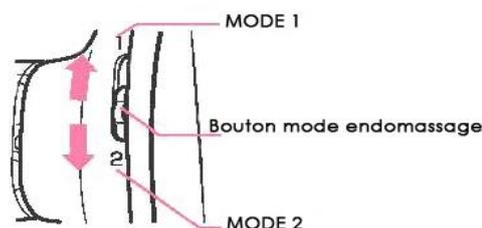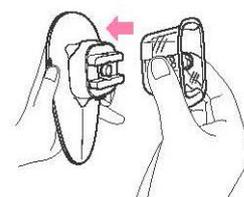

NOTE : Sur le CORPS, il est possible d'utiliser les 2 modes EMS et LIPO ensemble. Pour cela, sélectionnez les 2 modes en appuyant sur le bouton EMS (une diode rouge s'allume).

En mode LIPO, il est conseillé de porter un collant fin ou d'appliquer une huile végétale neutre sur le corps. Il sera alors plus facile de déplacer la coupe en douceur.

6. Tenez fermement l'appareil dans la main afin d'éviter toute chute.
 7. Déplacez doucement la coupe sur les parties du corps à traiter, en tirant sur la peau pour bien la tendre, sans effectuer de pression trop forte sur la peau.
 8. **Commencez par un massage drainant, en remontant du bas vers le haut sur la zone à traiter, comme indiqué sur les schémas ci-dessous.**
 9. **Puis, pour casser la cellulite, et pour avoir de meilleurs résultats, utilisez l'appareil «en travers» (en croix) de bas en haut, pendant une minute environ.**
 10. **Terminez votre séance avec un nouveau drainage, de bas en haut.**
 11. Appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence de l'aspiration (Release) si l'aspiration devient trop forte et désagréable.
 12. A la fin de la séance (10 minutes maximum), appuyez 3 secondes sur le bouton LIPO pour éteindre l'appareil.
- Il est conseillé d'utiliser l'appareil 10 minutes par zone tous les jours pendant un à 2 mois, puis 3 fois par semaine en entretien.**


EXEMPLES DE ZONES A TRAITER

Zone Ventre et taille


Petits mouvements lents du haut des cuisses à la taille



Mouvements de bas en haut, de sous le ventre à sous la poitrine

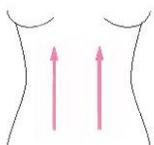


Mouvements amples de gauche à droite, en partant du bas et en évitant de passer sur le nombril

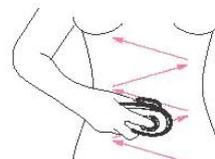


Zone Jambes

Mouvements de bas en haut à l'arrière du mollet

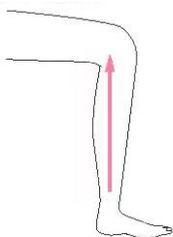

Mouvements de bas en haut sur l'extérieur de la cuisse

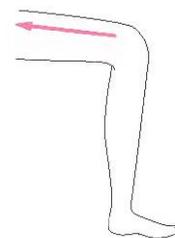


Zone Hanches

Partir de l'intérieur des genoux et remonter jusqu'aux hanches



Zone Intérieur du bras

Effectuez des mouvements de l'intérieur du coude aux aisselles

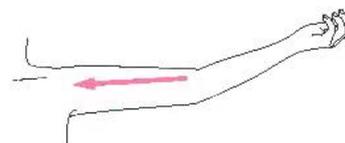

Sur les zones musculaires plus flasques, tendez bien la peau avec la main avant de passer la coupe, afin d'éviter que la peau ne soit trop pincée à l'intérieur de la coupe pendant l'aspiration.

UTILISATION EMS MICRO-STIMULATION

1. Pour mettre en marche l'appareil, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton EMS. Une diode rouge (EMS) s'allume.
2. Appuyez sur le bouton EMS pour sélectionner l'intensité.


- Lors des premières séances, il est conseillé de choisir l'intensité 1.
- Appliquez sur les plaques électrodes un sérum ou une crème pour faciliter le contact au niveau du bas visage (bas du nez, au niveau du menton), de l'eau ou du gel conducteur (non fourni) pour faciliter le contact avec la peau sur le reste du corps.
- Tenez fermement l'appareil dans la main afin d'éviter toute chute.
- Déplacez doucement la coupe sur les parties du corps à traiter.

VISAGE

Utilisez l'appareil, intensité 1, en coup de flash, de bas en haut, sur les pommettes et les bajoues (2 minutes maximum, soit une minute de chaque côté du visage).

L'appareil aide à activer la micro circulation sanguine et renforce l'élasticité de la peau, la rendant plus tonique et plus lumineuse.

Attention : Ne pas placer les électrodes autour des yeux, sur les carotides, sur les sinus, sur le front, sur le cou ou la tête. A utiliser uniquement sur le bas du visage.

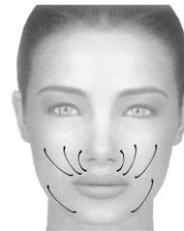

CORPS

Augmentez progressivement l'intensité. L'appareil aide à activer la micro circulation sanguine et renforce l'élasticité de la peau, la rendant plus tonique et plus lumineuse.

Attention : Ne pas placer les électrodes sur ou près du cœur, sur les parties génitales, sur une plaie ouverte ou une zone infectée ou en état inflammatoire.

Attention: avec le mode EMS, vous ressentez de légères stimulations électriques. Cela est tout à fait normal, il s'agit d'électrostimulation. Le corps s'habitue progressivement à ce courant électrique.

APRES UTILISATION



NETTOYAGE

- Après chaque séance, nettoyez l'unité principale et les coupes, surtout si vous utilisez l'appareil avec une huile, afin de ne pas encrasser l'appareil.

Attention : pour le nettoyage, l'appareil doit être éteint.

- Vérifiez que l'appareil est bien éteint.
- Ôtez la coupe de l'unité principale.
- Utilisez la pince à épiler pour ôter le filtre usagé.

Note : Le filtre se change environ une fois par mois à l'aide de la pince fournie (dès que la puissance de l'aspiration est anormalement faible).

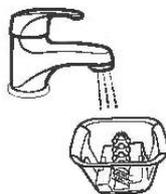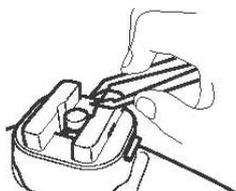

- Nettoyez la coupe sous le robinet.
- Nettoyez l'unité principale avec un chiffon doux humide mais pas mouillé.

N'utilisez pas de détergent sur l'unité principale ou sur les coupes.

Cet appareil n'est pas résistant à l'eau. Ne pas l'utiliser sous la douche et ne pas l'immerger.

DYSFONCTIONNEMENTS

Dysfonctionnement	Cause probable	Solution
L'unité principale ne s'allume pas.	Vous n'avez pas appuyé assez longtemps sur le bouton EMS ou le bouton LIPO.	Appuyez sur EMS ou LIPO pendant 3 secondes.
	La charge de la batterie de l'unité principale est trop faible.	Rechargez l'unité principale sur sa base de charge.
La batterie de l'unité principale est trop faible malgré une charge.	Le temps de charge n'a pas été assez long.	Rechargez l'unité principale intégralement comme mentionné dans ce manuel.
En charge, les diodes ne clignotent pas sur l'unité principale.	Le bloc secteur est mal branché.	Vérifiez le branchement sur la prise secteur.
	Le câble du bloc secteur est mal connecté à la base de charge.	Vérifiez la connexion sur la base de charge.
	L'unité principale est mal installée sur la base de charge.	Repositionnez l'unité principale sur la base de charge.

Vous ressentez des picotements désagréables avec la fonction EMS.	La coupe et les deux plaques EMS sont en mauvais contact avec la peau.	Veillez au bon contact des deux plaques EMS sur la peau, tout particulièrement lorsque vous déplacez la coupe.
	L'intensité de l'électrostimulation est trop forte.	Diminuez d'un niveau ou plus l'intensité de la stimulation EMS. Commencez toujours par le niveau 1.
	La peau est trop sèche.	Appliquez un peu d'huile végétale neutre, de l'huile sèche Caprylis sur la peau, ou un sérum sur le visage.
Aucune sensation en fonction EMS.	La peau est trop sèche.	Appliquez un peu d'huile végétale neutre, de l'huile sèche Caprylis sur la peau ou un sérum sur le visage.
	L'intensité de l'électrostimulation est trop faible.	Augmentez progressivement le niveau de l'intensité EMS (de 1 à 5).
	La région à traiter n'est pas sensible à l'électrostimulation.	Changez légèrement l'emplacement de la coupe. Le corps n'est pas sensible partout de la même manière.
En fonction endomassage (uniquement sur le corps) (aspiration) la coupe ne glisse pas sur la peau.	Le niveau d'aspiration choisi est trop fort.	Diminuez d'un niveau ou plus l'intensité l'aspiration LIPO. Commencez toujours par le niveau 1. Appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence RELEASE pour arrêter l'aspiration et libérer la coupe de la peau. Étirez bien la peau.
	La peau est trop sèche.	Appliquez un peu d'huile végétale neutre, de l'huile sèche Caprylis sur la peau ou porter un collant très fin.
L'aspiration pendant la fonction endomassage (uniquement sur le corps) est anormalement faible.	La coupe est en mauvais contact avec la peau.	Afin d'éviter toute fuite d'air, veillez au bon contact de la coupe sur la peau, tout particulièrement lorsque vous déplacez la coupe.
	La charge de la batterie de l'unité principale est trop faible.	Rechargez l'unité principale sur sa base de charge.
	La coupe est mal fixée sur l'unité principale.	Vérifiez la bonne installation de la coupe sur l'unité principale.
	La coupe devient sale.	Nettoyez la coupe sous le robinet.
	Le filtre sur l'unité principale est trop sale	Remplacez le filtre avec un neuf.

ENTRETIEN ET RANGEMENT

- Après chaque utilisation, veillez à bien éteindre l'unité principale.
- Avant une longue inutilisation prolongée, nettoyez bien l'unité principale et les coupes.
- Rangez l'appareil à l'abri de toute humidité et à température ambiante.
- Gardez bien l'appareil à distance des enfants.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	DC 5.0 V
Courant	Courant biphasique rectangulaire à moyenne nulle 0.5 A
Consommation	Environ 3 W en charge
Batterie	Type Li-ion Temps de charge : entre 2 et 3 heures (peut varier selon certains paramètres).
Dimensions (sans les coupes)	154 x 63 x 62 mm
Poids (sans les coupes)	Environ 180 g
EMS	Bases fréquences 5/10/20 et 100 Hz
LIPO Endomassage Aspiration	3.4V/4.2V 28-40 Kpa
Accessoires	Une base de charge
	Un adaptateur secteur
	Une grande coupe
	Une petite coupe
	Une pince à épiler pour nettoyage de l'appareil
	10 filtres
	Un manuel

BATTERIE

La batterie n'est pas couverte par la garantie. La durée de vie d'une batterie dépend de nombreux critères. **Après plusieurs années, la qualité de charge de la batterie diminue.**

GARANTIE

1. Mondial Innovation garantit l'absence du défaut et le caractère complet de l'appareil.
2. Les réparations doivent être exclusivement effectuées par notre propre Service Après-Vente.
3. La durée de la période de notre garantie pièces et main d'œuvre est de 2 ans après la date de votre achat, sous réserve des problèmes évoqués dans notre mode d'emploi.
4. Les réclamations ou les plaintes concernant notre produit doivent être adressées directement à nos Services. Nos Services, en relation avec le Vendeur, sont compétents pour déterminer la Cause et la Nature de la réclamation signalée. L'appareil sera remplacé uniquement s'il ne peut être réparé.
5. Le propriétaire de l'appareil devra faire parvenir celui-ci à l'adresse indiquée ci-après
DELATEX, ZAC DU PLATEAU, 17, RUE DES MARRONNIERS, 94240 – L'HAY LES ROSES, FRANCE
6. Le temps nécessaire pour effectuer la réparation dépend de l'importance de la réparation en cause.
7. La responsabilité de DELATEX pour un appareil sous garantie est limitée au prix facturé à notre client.

La garantie ne peut être appliquée dans les cas suivants :

- Le certificat de garantie a été incorrectement rempli ou falsifié, ou la facture n'est pas jointe à la garantie.
- L'appareil a été ouvert par l'acheteur ou un service non autorisé
- Les défauts observés proviennent d'une mauvaise utilisation, le non-respect du mode d'emploi
- La pénétration à l'intérieur de l'appareil de corps étrangers solides ou liquides
- Les signes de chute de l'appareil : brisure, craquements ou les signes de problèmes de transport effectués par l'acheteur
- Les défauts dus à des causes externes telles que : désastres naturels, incendie

Conditions de Retour

Le Produit doit être retourné accompagné du Certificat de Garantie correctement rempli et de la copie de la facture d'achat.

Merci de nous contacter par téléphone ou par E-mail avant de retourner votre appareil et de nous décrire le ou les problèmes rencontrés lors de l'utilisation à.

DELATEX
 Tel : 01.46.77.05.20 / Fax : 01.46. 78.18.42
 E-mail : delatex@wanadoo.fr

ELIMINATION

Elimination

Lors de l'élimination des matériaux, respectez les prescriptions locales. Pour jeter l'appareil, conformez-vous à la directive sur les appareils électriques et électroniques 2002/96/CE – DEEE (Déchets des Equipements Electriques et Electroniques). Pour toute question, adressez-vous aux collectivités locales responsables de l'élimination de ces déchets.



CE RoHS

Volet à conserver par l'acheteur	Volet à retourner
MONDIAL INNOVATION DELATEX 29, rue des Favorites 75015 Paris Tel : 01.45.31.03.84 Fax : 01.45.31.19.34 Bon de garantie 2 ans Pièce et main d'œuvre CYBERLINE BEAUTY EMS MASSAGER 4 IN 1 Corps & Visage Date d'achat : Cachet commercial ou adresse du revendeur :	Bon de garantie Volet à retourner dans les 15 jours pour la validation de la garantie à: MONDIAL INNOVATION DELATEX 29, rue des Favorites 75015 Paris Votre appareil est garanti 2 ans CYBERLINE BEAUTY EMS MASSAGER 4 IN 1 Corps & Visage Nom:.....Prénom:..... Adresse: Code postal: Ville: E-mail:.....@..... Date d'achat : Cachet commercial ou adresse du revendeur :