

# SLIM PRO V EZ TONE 0201 EMS BELT Cyberline

**2 TRES LARGES ELECTRODES**

## **MODE D'EMPLOI**

Ceinture de musculation abdominale  
Taille fine et ventre plat  
Fessiers et Cuisses



## **EZ-TONE SLIM PRO V MINCEUR ET FORME** Bienvenue! Pour une Silhouette idéale **EZ-TONE SLIM PRO V Cyberline**

### **ATTENTION**

**Par mesure de sécurité, votre appareil ne fonctionne que si les électrodes sont en contact avec la peau**

### **ATTENTION:**

Lisez soigneusement votre mode d'emploi avant d'utiliser votre appareil.

Lorsque vous utilisez EZ-TONE SLIM PRO V pour la première fois, il est recommandé de ne faire qu'une seule séance quotidienne durant la première semaine afin d'habituer vos muscles à ces exercices. Vous pourrez ensuite faire plusieurs séances par jour en laissant un intervalle de 5 à 6 heures entre deux séances.

### **Important / Détection contact:**

**S'il n'y a pas de contact entre la peau et les électrodes, l'intensité revient automatiquement à " 0 ". Donc si la ceinture n'est pas en contact avec votre corps, l'intensité est à " 0 " même si l'appareil est en position " ON ". Cela préserve l'utilisateur de sensations désagréables.**

### **ON/OFF**

Pressez le bouton **ON** pour mettre en marche l'appareil.

Pressez le même bouton vers le bas durant 3 secondes pour arrêter l'appareil.

Pressez ce bouton brièvement lorsque le système est en marche et pressez-le à nouveau brièvement avant de démarrer les programmes.



### **P: Bouton des programmes**



Pressez ce bouton pour changer de programme  
\*Pressez ce bouton pendant 3 secondes sans toucher au bouton **ON/OFF**

Flèches: **Bouton d'intensité:**

Pour augmenter l'intensité, appuyez sur la flèche ↑  
Pour diminuer l'intensité, appuyez sur la flèche ↓

### **Compartiment des piles:**

Faites glisser le couvercle vers l'extérieur et placez 3 piles 5V AAA

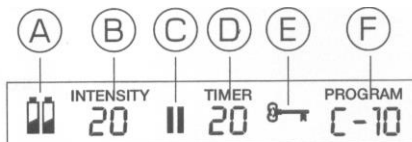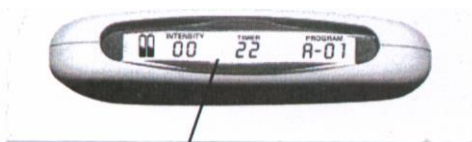

### **Ecran**

Affiche différentes informations au cours du fonctionnement de l'appareil.

### **EZ-TONE SLIM PRO V Cyberline**

Merci d'avoir choisi la ceinture EZ-TONE SLIM PRO V, votre appareil personnel de tonification de la sangle abdominale.

**Ce système est tout spécialement conçu pour remuscler vos abdominaux dans le plus grand confort.**

#### **1. Mise en marche:**

Lorsque vous aurez sorti votre EZ-TONE SLIM PRO V de son emballage, l'appareil est fixé sur son support sur la ceinture. Pour détacher l'appareil poussez fermement à l'aide de vos mains, faites glisser le système vers le haut à l'extérieur de son support.

#### **2. Placez vos piles:**


Faites glisser le couvercle du compartiment des piles (voir schéma). Insérez 3 piles 1,5volts AAA en veillant à la correspondance des polarités (une mauvaise position empêche l'appareil de fonctionner et risque de l'endommager).



EZ-TONE SLIM PRO V est extrêmement facile à utiliser grâce à ses éléments automatiques: une action simple sur les boutons et un écran vous communique tous les détails de votre exercice musculaire.

## TOPOGRAPHIE DES EMBLEMES DES ELECTRODES

### *Points moteurs des muscles*

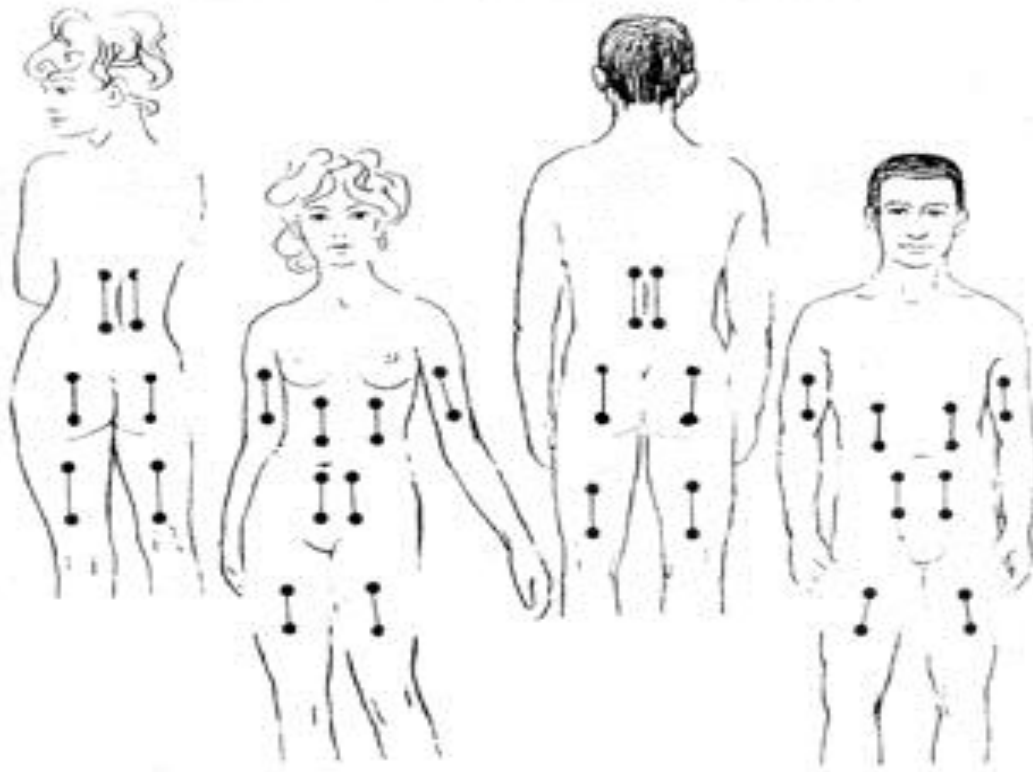

#### **Les 5 programmes spécifiques développés sont automatiques.**

Différents réglages d'intensité ont été optimisés pour muscler de façon effective avec une grande facilité votre sangle abdominale.

#### **Point important:**

**Assurez-vous que les électrodes soient bien humectées avant votre séance. Les électrodes sont les deux grosses parties en caoutchouc de chaque côté de la ceinture.**

Placez sur les électrodes une très petite quantité du gel fourni avec l'appareil.

**Après avoir mis en place ceinture et appareil, comme précédemment indiqué, lisez attentivement ce qui suit :**

Appuyez sur le bouton **ON/OFF** brièvement pour mettre l'appareil en marche: vous devez entendre un **bip** et l'écran doit s'allumer.

Si vous utilisez votre EZ TONE SLIM PRO V pour la première fois, le programme " A-01" est en route.

Il est recommandé de commencer par ce programme. Cependant si vous souhaitez changer de programme, vous pouvez appuyer sur bouton " P ".

**Ensuite appuyer sur la flèche ↑ pour augmenter l'intensité jusqu'à éprouver une sensation confortable de contractions.**

**Note : Si vous n'augmentez pas l'intensité, l'appareil ne démarre pas et s'éteindra automatiquement.**

Vous pouvez toujours l'augmenter ensuite en cours de séance ↑ ou la diminuer ↓.

L'appareil possède 40 degrés d'intensité afin de s'adapter à toutes les sortes de muscles (des muscles atones aux muscles les plus vigoureux).

Si à un moment quelconque, vous souhaitez arrêter votre séance, il vous suffit d'appuyer sur le bouton **ON/OFF** pendant 2 secondes.

### **Comment fonctionne votre ceinture EZ-TONE?**

EZ-TONE fonctionne sur les principes de l'E.S.M (Electrostimulation Musculaire). L'appareil génère des impulsions douces transmises aux points moteurs des muscles au travers de larges électrodes. Vos muscles se contractent et se relaxent comme lors d'un exercice de gymnastique.

Ces impulsions ainsi générées ont été conçues pour imiter le travail naturel des contractions musculaires efficace et confortable.

Les programmes provoquent ces impulsions à intervalles réguliers contractant et relaxant les muscles abdominaux.

### **Quelle sensation éprouve-t-on?**

Au début vous ressentirez une sensation douce. Au fur et à mesure que vous augmenterez l'intensité, vous augmenterez les contractions de vos muscles sur toute la sangle abdominale.

Ces contractures sont douces et chacune d'elle évolue progressivement durant quelques secondes pour se terminer par une confortable relaxation.

L'exercice doit être adapté à votre résistance personnelle et être toujours confortable. Il doit être adapté à l'état de vos muscles. Il est donc recommandé de commencer progressivement parce que les programmes ont été spécialement étudiés pour permettre à votre système musculaire de s'adapter.

### **Fonctions automatiques:**

#### **Arrêt automatique:**

Si l'unité est en marche, l'intensité est à " 0 ", non utilisée pendant cinq minutes, l'appareil s'éteindra automatiquement.

#### **Important / Détection contact:**

**S'il n'y a pas de contact entre la peau et les électrodes, l'intensité revient automatiquement à " 0 ". Donc SI la ceinture n'est pas en contact avec votre corps, l'intensité est à " 0 " même si l'appareil est en position " ON ". Cela préserve l'utilisateur de sensations désagréables.**

#### **Usure des piles:**

Lorsque les piles sont usées, l'indicateur " Piles " apparaît sur l'écran et vous devrez les remplacer.



#### **Fonction mémoire:**

L'appareil conserve en mémoire le dernier programme utilisé. Si le programme était terminé, le programme suivant apparaît automatiquement.

Retour au premier programme lorsque les piles ont été enlevées de l'appareil.

#### **Fonctions spéciales:**

##### **Verrouillage des boutons clés:**

Lorsque vous avez choisi le degré d'intensité le plus confortable, vous devez verrouiller la clé pour éviter les changements d'intensité accidentels (mauvaise manipulation). Appuyez sur le bouton "Programme" et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, vous verrez alors apparaître le symbole "clé" et vous entendrez un "Bip". Après ce verrouillage, l'intensité et le programme choisis sont fixés.

Pour déverrouiller les clés, il vous suffira d'appuyer sur la clé de nouveau pendant 3 secondes, Après le "Bip" et la disparition du symbole "Clé" vous pourrez à nouveau modifier programme et intensité.

##### **Programme « On/Off Time »:**

**Chaque programme possède un « On time » lors de la contraction musculaire et un « Off time » pendant la période de relaxation.** Le « On time » et le « Off time » durent plusieurs secondes et sont répétés tout au long de la durée du programme.

## Sécurité:

Pendant le « On time », l'intensité ne peut pas être augmentée mais seulement diminuée et le mot "Intensity" clignote sur l'écran.

## La ceinture :



La ceinture EZ-TONE SLIM PRO V a été conçue pour répondre à un large éventail de tailles. Le matériel spécifique est facile à étirer et la ceinture se place confortablement et discrètement autour de la taille. Placez la ceinture, électrodes à l'intérieur, face à votre corps. Mouillez les électrodes noires et votre peau avec le gel fourni (vous pouvez aussi utiliser de l'eau). Assurez-vous que les électrodes restent bien mouillées. Ensuite placez votre ceinture autour de votre taille, les électrodes bien appliquées sur votre sangle abdominale. Attachez fermement les velcros afin d'obtenir un bon contact entre les électrodes et votre peau.



## Remplacez l'appareil sur son support:

Après la mise en place de votre ceinture, remettez l'appareil sur son support. L'écran face à vous est parfaitement visualisable. Un clic vous indique que l'appareil s'est bien enclenché sur son support.

## Écran EZ-TONE SLIM PRO V :

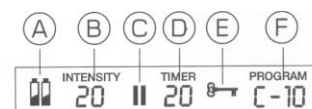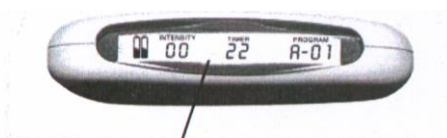

Cet écran est totalement informatif, il vous guide sur l'utilisation des programmes, de l'intensité, de l'usure des piles, de la pause, du temps restant sur votre séance et du verrouillage (clé) de l'indicateur.

- A. Signal** Usure des piles. Le symbole piles apparaît lorsque les piles usées doivent être remplacées.
- B. Intensité** De 0 à 40.
- C. Pause** Indique quand le programme est en pause
- D. Timer** Indique le temps restant sur la séance du programme en cours.
- E. Lock** Verrouillage de l'intensité (ne peut pas être augmentée ou diminuée)
- F. Program** Le programme en cours indique le nombre d'exercices effectués pour ce même programme.

## PROGRAMMES

La ceinture EZ Tone Slim Pro V possède 5 programmes, que vous pouvez modifier au fil des semaines :

- Première semaine par le programme A, avec une faible intensité, que vous pourrez augmenter progressivement.

La ceinture passe automatiquement au programme suivant après un certain nombre de séances sur le même programme. Cependant, vous pouvez, bien entendu, choisir à chaque séance votre programme vous-même.

Chaque programme comporte 3 phases:

- Une phase d'**échauffement** (30 Hz) de 2 minutes, pour préparer les muscles à l'entraînement et à la minceur.
- Une phase d'**entraînement/minceur**, dont la fréquence dépend du programme sélectionné, A, B, C, D ou E
- Une phase de **relaxation** (30 Hz) de 2 minutes, pour détendre les muscles à la fin de l'entraînement.

Programme	Durée de la séance	Répétitions	Fréquence Hz
<b>A</b>	<b>22 min</b>	<b>4</b>	<b>45/60</b>
<b>B</b>	<b>22 min</b>	<b>4</b>	<b>60/80</b>

<b>C</b>	<b>22 min</b>	<b>8</b>	<b>45</b>
<b>D</b>	<b>31 min</b>	<b>16</b>	<b>60</b>
<b>E</b>	<b>31 min</b>	<b>Continu</b>	<b>80</b>

### Résultats visibles après 2 à 3 semaines

Ce système est tout spécialement conçu pour remuscler vos abdominaux dans le plus grand confort

**EZ-TONE SLIM PRO V** génère des impulsions douces transmises aux points moteurs des muscles au travers de 2 larges électrodes.

Vos muscles se contractent et se relaxent comme lors d'un exercice de gymnastique.

### 5 Programmes spécifiques développés automatiques 40 niveaux d'intensité

Rapide et très simple:

#### Sensation inconfortable:

Si vous éprouvez une sensation désagréable au lieu de bonnes sensations, arrêtez le programme suivez les indications ci-après.

- Otez votre ceinture et assurez-vous que les électrodes soient bien humidifiées.
- Vérifiez que les électrodes soient en bon état.
- Lorsque vous attachez votre ceinture, assurez-vous que les électrodes soient bien en contact avec la peau et la ceinture fermement attachée autour de votre sangle abdominale.
- Augmentez l'intensité d'un degré.

**Si votre peau rougit ou présente une irritation, arrêtez vos séances jusqu'à disparition de l'irritation.** Cela peut-être dû parfois aux électrodes mal humectées.

Parfois aussi le corps produit en excès des substances huileuses, au travers de la peau, qui peuvent nuire à une bonne conduction du courant.

Nettoyer la peau avec un tissu sec avant l'utilisation de l'appareil est souvent une bonne solution.

**Maintenez toujours une pause de 5 à 6 heures entre 2 séances.**



**Cuisse interne**  
Position identique  
sur l'autre cuisse



**Cuisse/Quadriceps**  
Position identique  
sur l'autre cuisse



**Muscles fessiers**  
Position identique  
sur l'autre fesse



**Petit bassin**



**Ventre et Abdominaux**

#### Arrêt des programmes:

Si à un moment quelconque, vous décidez d'arrêter votre programme, pressez brièvement le bouton **ON/OFF**, vous entendrez un " bip " et le symbole "Pause "apparaîtra à l'écran.

Pour continuer votre programme pressez à nouveau le bouton, vous entendrez un " bip ' et le programme repartira de la phase qui a été arrêtée.

**Il est important de bien croiser la ceinture en fonction de l'épaisseur du membre. Les électrodes doivent être parfaitement en contact avec la peau. Pour une stimulation sur les fesses et les cuisses suivre l'exemple des visuels ci-dessus.**

EZ-TONE SLIM PRO V possède 5 programmes spécifiques qui vous offrent le plus performant degré d'exercices d'un programme à l'autre. L'entraînement, les contractions musculaires deviennent plus longues et plus forts lorsque vous allez du programme A jusqu'au programme E.

Chaque programme est conçu pour un temps spécifique et chaque programme répète un certain nombre d'exercices jusqu'au programme suivant. Par exemple, lorsque vous commencez par le programme "A-01", celui-ci se poursuivra pour le temps indiqué et s'arrêtera automatiquement.

Appuyer sur le bouton **ON** le programme "A-02" commencera, visualisé sur votre écran. Si vous ne terminez pas votre séance sur un programme déterminé, la suite du menu programme continuera lorsque vous mettrez l'appareil en marche.

Si vous vous sentez prêt à augmenter l'intensité, utilisez le bouton Flèches. Si vous changez de programme en cours de séance, l'intensité retombera à zéro, par sécurité pendant 2 secondes et ensuite reviendra au degré d'intensité original du précédent programme. A tout moment, vous pouvez diminuer le degré d'intensité en appuyant sur la ↓ intensité.

Tous les programmes EZ-TONE SLIM PRO V ont été conçus avec une phase d'introduction avant la séance d'exercices musculaires et une phase finale rafraîchissante de relaxation musculaire avant la fin de la séance.

Il est recommandé d'augmenter l'intensité modérément après les premières 2 minutes de la phase d'introduction. Vous obtiendrez ainsi le maximum de bénéfices au cours de votre séance d'exercices.

Une alimentation saine et quelques exercices combinés à vos séances EZ-TONE vous permettront d'obtenir des résultats optimaux.

#### **Précautions générales:**

- 1 Ne jamais laver votre ceinture à la machine. Lavez-la à la main et à l'eau tiède
- 2 Ne pas utiliser de détergent pour laver votre ceinture
- 3 Ne pas immerger l'appareil dans l'eau
- 4 Ne pas tenir votre appareil près d'une source de chaleur
- 5 Otez les piles de votre appareil si vous ne devez pas l'utiliser pendant une longue période
- 6 Utilisez obligatoirement le modèle de piles correct (1,5 volts AAA LR 03) et assurez-vous qu'elles soient correctement placées dans leur compartiment.

#### **Contre-indications:**

Ne pas utiliser EZ-TONE SLIM PRO V

- Si vous êtes porteur d'un stimulateur cardiaque ou si vous souffrez de problème cardiaque.
- Si vous êtes atteint de cancer ou d'épilepsie.
- Si vous êtes enceinte
- Si vous souffrez de cardiopathies sur la zone thoracique notamment
- Si vous souffrez de phlébites, d'états fébriles, de thrombophlébites
- Présence de maladies graves sans avis médical
- Si vous avez une hernie inguinale ou abdominale
- En cas de troubles artériels importants

Ne pas placer les électrodes sur les carotides, sur les sinus, sur le front, sur le cou ou la tête

Ne pas placer les électrodes sur ou près du cœur

Ne pas placer les électrodes sur les parties génitales, sur une plaie ouverte ou une zone infectée ou en état inflammatoire.

Très rarement une irritation de la peau peut apparaître à l'emplacement des électrodes. En ce cas, il est préférable de stopper les séances jusqu'à disparition des rougeurs.

#### **Paramètres des courants:**

Voltage	70v/ 500 ohm
Courant	140mA/500 ohm
Fréquences	3 à 80 Hz
Forme de courant " wave form "	Biphase - symétrique de forme rectangulaire mesuré à partir d'un standard

Puissance piles	3 piles 1.5 v AAA LR03
Largeur d'impulsion	200µs par phase

**Conditions d'environnement:**

- 1 Appareil en fonctionnement:  
0 - 40° centigrades  
20 - 65 % RH Humidité
- 2 Rangement de l'appareil:  
0 - 55° C  
10 - 90 % RH Humidité

Cet équipement est protégé contre les chocs électriques grâce à des éléments isolants.

**Attention consultez attentivement ce document avant toute utilisation.**

**GARANTIE:**

Votre appareil EZ-TONE SLIM PRO V est totalement garanti pendant une durée de 2 ans à partir de la date de votre achat.

Si votre appareil présente un problème pendant cette période, retournez-le avec votre bulletin de garantie sur votre lieu d'achat. Vous pouvez aussi contacter **Mondial-Innovation "service Cyberline"**. **Dans ce cas, l'appareil sera réparé gratuitement ou échangé.**

Attention la garantie ne peut pas s'appliquer si votre appareil a été accidentellement endommagé, s'il a été "bricolé", ou si vous avez tenté d'adapter des éléments étrangers ou si vous avez essayé de le faire réparer en dehors de nos services.



La directive DEEE est applicable à compter du 13 août 2005 et prévoit notamment la collecte sélective des déchets électriques et électroniques ainsi que le traitement sélectif et la valorisation de ces déchets.

Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains. Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce service.

GARANTIE

Volet à conserver par l'acheteur	Volet à retourner
<b>Mondial Innovation DELATEX</b> <b>29, rue des Favorites 75015 Paris</b> <b>Tel: 01.45.31.03.84</b> <b>Fax: 01.45.31.19.34</b>  Bon de garantie 2 ans: <b>SLIM PRO V EZ TONE</b> Pièce et main d'œuvre:  Date d'achat :  Cachet commercial ou adresse du revendeur:	<b>Bon de garantie</b> <b>Volet à retourner dans les 15 jours pour la validation de la garantie à:</b>  Mondial Innovation DELATEX 29, rue des Favorites 75015 Paris  Votre appareil est garanti 2 ans <b>SLIM PRO V EZ TONE</b> Nom: .....Prénom: ..... Adresse: ..... ..... Code postal: .....Ville: ..... E-Mail : .....@.....  Date d'achat : ..... Cachet commercial ou adresse du revendeur:

DELATEX Tel : 01.46.77.05.20 Fax : 01.46.78.18.42

Site web : [mondial-innovation.com](http://mondial-innovation.com) / e-mail : [delatex@wanadoo.fr](mailto:delatex@wanadoo.fr)

DELATEX, ZAC du Plateau, 17 rue des Marronniers, 94240 L'Haÿ les Roses